
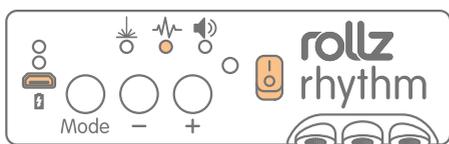


rollz®

Rollz Motion Rhythm

IT - Guida ai moduli e alle applicazioni

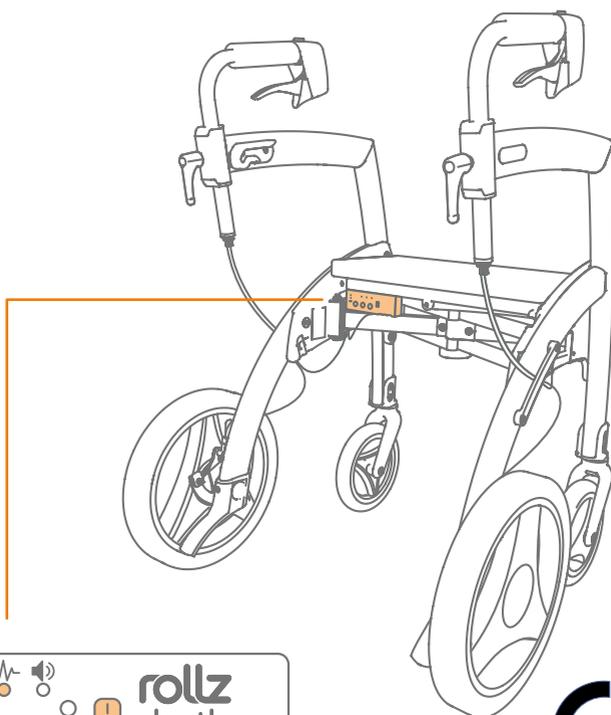

CE

GUIDA AI MODULI E ALLE APPLICAZIONI

rollz motion rhythm

IT

La versione più recente di questo manuale può essere trovata sul nostro sito web e nella area delle impostazioni dell'app Rollz.

PRIMA DI INIZIARE

Questa guida è un'aggiunta al manuale utente del Rollz Motion.

È possibile impostare e utilizzare il modulo Rollz Rhythm in due modi: tramite il modulo sul rollator e/o tramite l'app.



ATTENZIONE!

Il Rollz Motion Rhythm contiene componenti elettronici. Pertanto, evitare che il rollator si bagni. Non usarlo all'esterno sotto la pioggia battente. Utilizzare solo l'adattatore micro USB in dotazione per caricare il modulo.

DETTAGLI TECNICI DEL MODULO

Temperatura di funzionamento: da -5°C a +45°C


Tensione e corrente nominale: 5V DC - 0,5A

Capacità della batteria: (1S2P) 5200mAh

Frequenza di connessione wireless: 2.4GHz - 2.5GHz

CARICARE IL MODULO RITMICO ROLLZ

Prima di avviare il modulo, assicurarsi che sia carico. Per caricare, utilizzare l'adattatore micro USB incluso. Il connettore USB si trova sul lato sinistro del modulo.

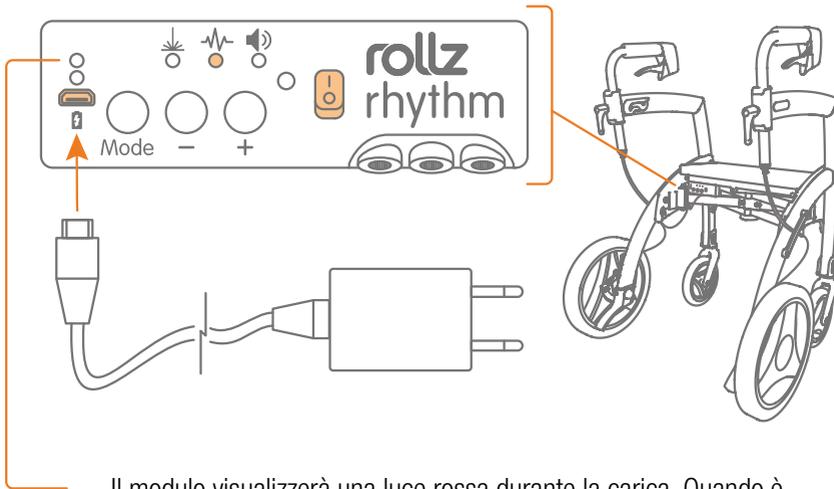

Il modulo visualizzerà una luce rossa durante la carica. Quando è completamente carica, questa luce diventerà verde. Caricare il modulo solo con un adattatore di 5V e 1A.

La durata della batteria dipende dall'uso. La batteria può essere caricata in qualsiasi momento. Una batteria completamente scarica richiede 10 ore di ricarica.

Nota: quando la batteria è scarica e il modulo non può più avviarsi, caricare la batteria con il caricatore micro USB incluso.



INSTALLARE L'APP ROLLZ

L'applicazione Rollz può essere scaricata gratuitamente sul tuo smartphone o tablet dal Play Store (per Android) o App Store (per iOS). Cerca per "Rollz".




Rollz



CONTROLLO DEL MODULO SUL ROLLATOR

Per accendere il modulo, far scorrere l'interruttore di accensione verso l'alto. Attendere qualche secondo per l'accensione.

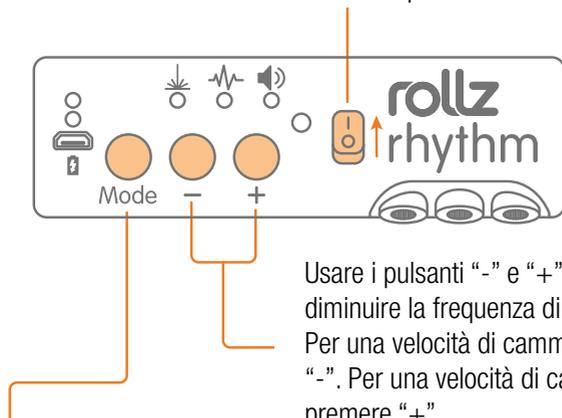

Usare i pulsanti “-” e “+” per aumentare o diminuire la frequenza di camminata in passi/min. Per una velocità di camminata più lenta, premere “-”. Per una velocità di camminata più veloce, premere “+”.

Usare il pulsante “Mode” per passare attraverso le possibili combinazioni di stecche: laser, vibrazione e suono. Le stecche attive saranno visualizzate dai LED.




- ● ● Tutte le stecche
- ○ ○ Laser
- ● ○ Vibrazione
- ● ○ Laser e vibrazione
- ○ ● Suono
- ○ ● Laser e suono
- ● ● Vibrazione e suono

Per ripristinare le impostazioni predefinite, tenere premuti entrambi i pulsanti “-” e “+” per due secondi. Impostazioni predefinite: tutti i segnali sono attivi, intensità media intensità, 16 ripetizioni e 66 passi/min.

Sono disponibili impostazioni extra e possono essere impostate nell'app Rollz.


AVVIARE GLI SPUNTI MENTRE SI CAMMINA

Usare uno qualsiasi dei due pulsanti sulle manopole per avviare o fermare le stecche. Premere brevemente per avviare le stecche e di nuovo per fermarle.

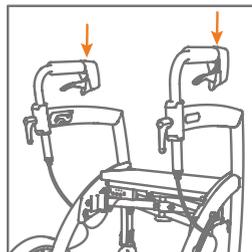

COLLEGARE IL MODULO (con l'app)

Accendere il modulo sul rollator e aprire l'app Rollz per connettersi.

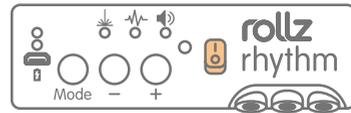


Il modulo può essere collegato tramite Bluetooth. Quando si apre l'app si devono fare alcuni passi per connettersi al dispositivo.

Toccare l'icona
'BLUETOOTH ON'

Scansione dei dispositivi

Scegli il dispositivo chiamato
"RollzRhythm"

Toccare **CONNECT**

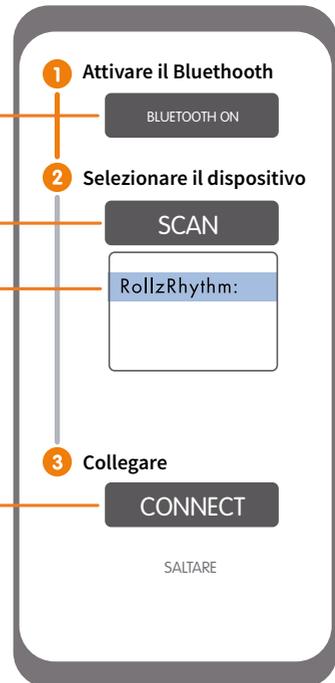

Quando il modulo è collegato con successo, l'app Rollz mostrerà il "simbolo connesso" nell'angolo in alto a destra.

Allo stesso tempo, i LED di tutte le stecche attive lampeggeranno sul modulo.



USANDO L'APP ROLLZ

Con l'app puoi impostare più opzioni che tramite il modulo.

Toggle per attivare/disattivare le stecche.

1. Laser
2. Vibrazione
3. Suono
4. Ricevi spunti sul telefono

Toggle per attivare/disattivare le stecche sul telefono.

Intensità del suono.

Regolazione della lunghezza del modello di 8, 16, 32 passi o ripetizione continua.

Scorrere verso il basso nell'app Rollz per regolare ogni passo individualmente per le rispettive stecche. Tocca per attivare/disattivare ogni passo.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	All	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laser
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vibrazione																
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nota alta
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nota bassa

Una volta che le impostazioni desiderate sono impostate, tocca **SALVA**. Il modulo Rollz Rhythm ora eseguirà un esempio delle nuove impostazioni salvate.

Nota: le impostazioni modificate nell'app avranno luogo solo dopo aver toccato **SALVA**.

Il ritmo del pattern può anche essere regolato nell'app Rollz toccando "+" o "-". Il cambiamento della quantità di passi al minuto può essere visto nella parte superiore dello schermo quando questi pulsanti sono inseriti. Premi **SALVA** dopo ogni regolazione.

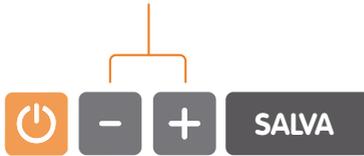

Il modello può essere attivato o disattivato a distanza, toccando il pulsante on/off.

Nota: aggiorna l'applicazione quando è disponibile una nuova versione.

PROTEZIONE DELLA PRIVACY

Rollz International tratta la tua privacy con cura. Tutte le tue impostazioni sono memorizzate sul modulo e sul tuo smartphone/tablet.

GARANZIA

Il tuo rollator Rollz Motion Rhythm è coperto dalle condizioni di garanzia nel Rollz Motion. Le parti specifiche del tuo Rollz Motion Rhythm sono coperte da i seguenti periodi di garanzia:


1. Il modulo Rollz Rhythm è in garanzia per un periodo di 24 mesi.
2. Le maniglie del Rollz Motion Rhythm che contengono la parte vibrante sono coperte da 12 mesi di garanzia.
3. La batteria nel modulo Rollz Motion Rhythm è completamente garantita per 12 mesi.

ACCESSORI

Il Rollz Motion Rhythm è fornito come un rollator. Se vuoi essere in grado di trasformarlo in una sedia da trasporto in movimento, è possibile acquistare il pacchetto sedia da trasporto. Tutti gli accessori del Rollz Motion si adattano anche al Rollz Motion Rhythm.

CONSIGLI PER L'UTENTE

Suggerimenti per l'uso ottimale del tuo rollator possono essere trovati su **www.rollz.com**.

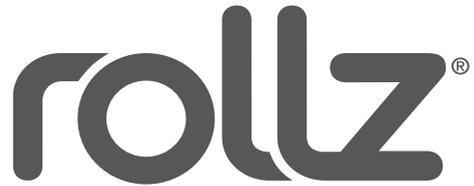

Rollz® International BV

Rotterdamseweg 402M
2629HH DELFT
The Netherlands

+31 (0)20 362 20 10
www.rollz.com
info@rollz.com



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational