




Rollz Motion Rhythm

SE - Modul och app-instruktion

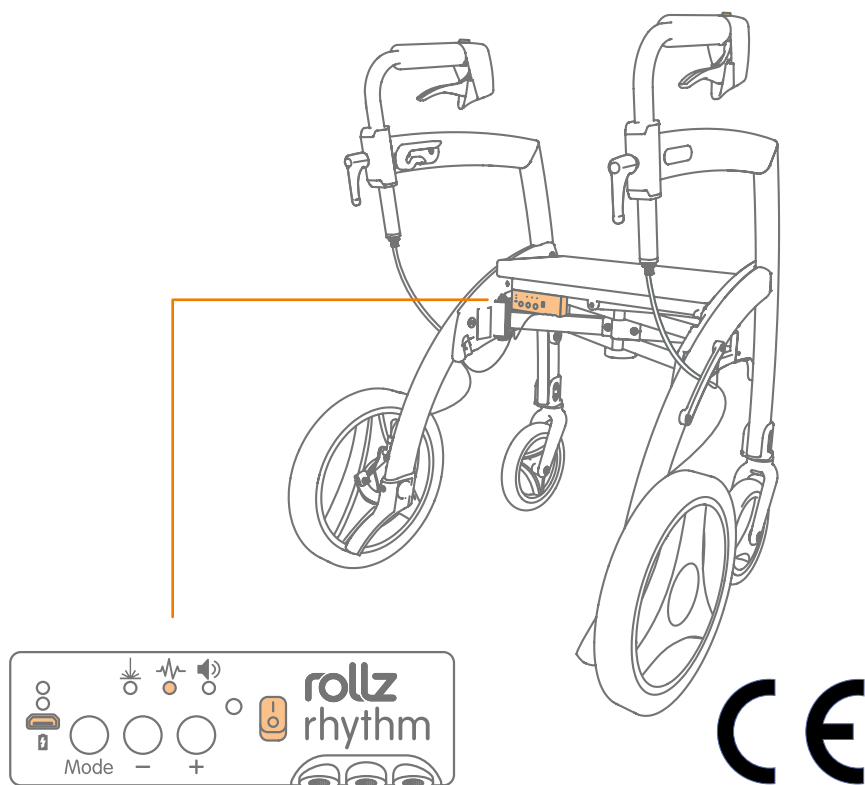

MODUL OCH APP-INSTRUKTION

rollz motion rhythm

SE

Den nyaste versionen av denna bruksanvisning finns på vår hemsida och under inställningar på Rollz-appen.

INNAN DU BÖRJAR

Denna bruksanvisning är ett tillägg till bruksanvisningen för Rollz Motion.

Modulen för Rollz Rhythm kan installeras på två sätt: Via modulen på rollatorn och/eller via appen.



OBSERVA!

Rollz Motion Rhythm innehåller elektriska komponenter, varför det är viktigt att rollatorn inte blir blöt. Använd den inte utomhus i kraftigt regn.

Använd endast den medföljande USB-adaptern för att ladda Rollz Rhythm.

MODULENS TEKNISKA DETALJER

Driftstemperatur: -5°C till +45°C


Strömstyrka och spänning: 5V DC - 0,5A

Batterikapacitet: (1S2P) 5200mAh

Trådlös anslutningsfrekvens: 2.4GHz - 2.5GHz

LADDNING AV ROLLZ RHYTHM-MODULEN

Innan modulen sätts på, se till att den är laddad. För laddning använd den medföljande micro USB-adaptern. USB-anslutningen sitter på modulens vänstra sida.

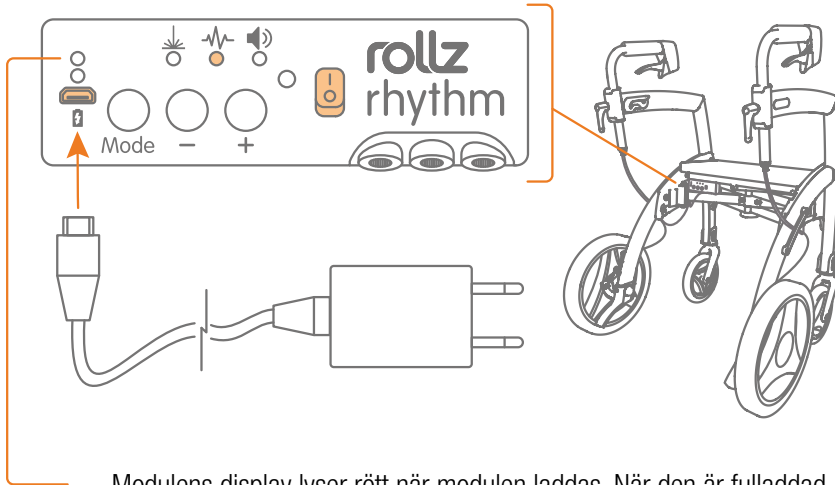

Modulens display lyser rött när modulen laddas. När den är fulladdad lyser lampan grönt. Modulen får bara laddas med en adapter med 5V och 1Ah.

Batterilängden är beroende av användningen. Batteriet kan laddas när som helst. Ett helt urladdat batteri tar ca 10 timmar att ladda upp.

Observera: När batteriet är tomt och modulen inte längre kan startas, ladda batteriet med den medföljande micro USB-laddaren.



INSTALLATION AV ROLLZ-APPEN

Rollz-appen kan laddas ner gratis till din Smartphone eller surfplatta från Play Butik (Android) eller AppStore (för iOS). Sök efter "Rollz".




Rollz



MODULEN PÅ ROLLATORN

För att slå på modulen, för strömbrytaren uppåt. Låt det gå några sekunder för att starta.

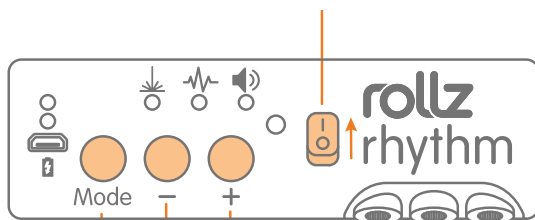

Använd “-” och “+” knapparna för att öka respektive minska stegfrekvensen i steg/min. För en långsammare gånghastighet tryck på “-”. För en snabbare takt tryck “+”.

Använd ”Mode”-knappen för att byta mellan de olika signalkombinationerna: laser, vibration och ljud. Vald signal kommer att visas på displayen.



- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ● | ● | ● | Alla signaler |
| ● | ○ | ○ | Laser |
| ○ | ● | ○ | Vibration |
| ● | ● | ○ | Laser & Vibration |
| ○ | ○ | ● | Ljud |
| ● | ○ | ● | Laser & Ljud |
| ○ | ● | ● | Vibration & Ljud |


Ytterligare inställningar finns och kan göras i Rollz-appen.

För att återställa till standardinställningar, tryck och håll nere både “-” och “+” knapparna i två sekunder.

Standardinställningar: Alla signaler på, medium intensitet, 16 repetitioner och 66 steg/minut.


STARTA SIGNALERNA UNDER GÅNG

Använd vilken som helst av de två knapparna på handtagen för att starta och avbryta signalerna. Tryck kort för att starta signalerna och en gång till för att avbryta.

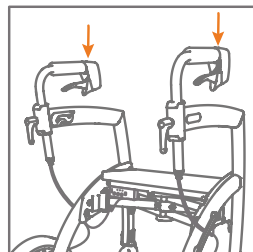

ANSLUTNING AV APPEN (med appen)

Slå på modulen på rollatorn och öppna Rollz-appen för att ansluta.

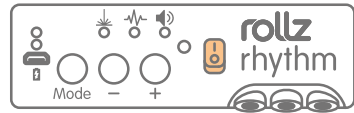


Modulen kan anslutas med Bluetooth. När appen öppnar behöver följande steg tas för att ansluta till enheten.

Klicka på **'BLUETOOTH ON'**-symbolen

Skanna efter enheter

Välj enheten "RollzRhythm"

Klicka på **ANSLUTA**

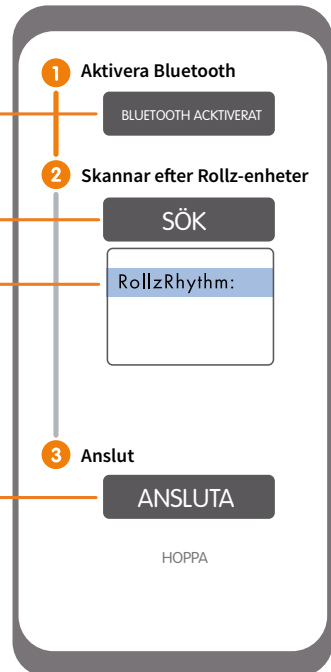

När modulen är ansluten kommer Rollz appen visa "ansluten" uppe i högra hörnet.

Samtidigt kommer lysdioderna för samtliga aktiva signaler att blinka på modulen.



ATT ANVÄNDA ROLLZ-APPEN

Med appen kan man ställa in fler valmöjligheter än via modulen på rollatorn.

Växla för att aktivera/avaktivera signaler.

1. Laser
2. Vibration
3. Ljud
4. Mottag signaler på telefonen

Växla för att aktivera/
avaktivera signaler på
telefonen.

Ljudintensitet

Justera gångmönster och längd
mellan 8, 16, 32 steg eller
kontinuerlig upprepning.

Scrolla ner i Rollz appen för att justera varje
steg individuellt för respektive signal.
Tryck aktivera/inaktivera på varje steg.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	All	
	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Laser
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Vibration
	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Hög Ton
	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Låg ton

När önskad inställning är skapad, tryck **SPARA**. Rollz Rythm modulen kommer nu att spara ett exempel av de nya inställningarna.

Obs: Inställningar som görs i appen sparas endast om man trycker **SPARA**.

Rytmmönstret kan också justeras i Rollz-appen genom att trycka “+” eller “-”. Ändringen av antal steg per minut visas överst på skärmen när dessa knappar väljs. Tryck **SPARA** efter varje justering.

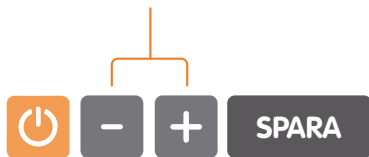

Mönstret kan aktiveras eller avaktiveras trådlöst genom att klicka på av/på-knappen.

Obs: Uppdatera appen när en ny version är tillgänglig..

SEKRETESS

Rollz International värnar om din integritet. Alla dina inställningar är lagrade på modulen och på din smartphone/läsplatta.

GARANTI

Din RollzMotion Rhythm rollator går under garantivillkoren i Rollz Motion manualen. De individuella delarna av din Rollz Motion Rhythm täcks av följande garantiperioder:

1. Rollz Rhythm-modulen har en garanti på 24 månader.
2. Rollz Motion Rhythm-handtagen som har vibration täcks av 12 månaders garanti.
3. Batteriet på Rollz Motion Rhythm-modulen har en garanti på 12 månader.

TILLBEHÖR

Rollz Motion Rhythm levereras som en rollator. Om du vill kunna ändra den till en transportrullstol kan du köpa till ett transportstolspaket. Alla Rollz Motion-tillbehör fungerar även till Rollz Motion Rhythm.

ANVÄNDARTIPS

Tips för bästa möjliga användning av din rollator finns på www.rollz.com.



Rollz® International BV

Rotterdamseweg 402M
2629 HH DELFT
The Netherlands

+31 (0)20 362 20 10

www.rollz.com

info@rollz.com



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational